

**(en) HEMATYPE SEGMENT DEVICE**

For Transferring Laboratory Blood Samples From Tubing Segments

**Rx only**

Store at Room Temperature. Protect from freezing. Avoid excessive heat.

Definition of "Room Temperature":

"The temperature prevailing in a working area."

Reference: United States Pharmacopeia, General Notices. United States Pharmacopeial Convention, Inc. 12601 Twinbrook Parkway, Rockville, MD.


**Cautions:**

- Always wear protective safety attire (gloves, lab coat, safety glasses).
- The Hematype Segment Device is for Single Use Only.
- The Hematype Segment Device is for General Laboratory Use Only.
- When inserting segment, always hold Hematype Segment Device and never touch glass test tube.

**Step 1:** Set test tube in rack. Place Hematype Segment Device on top of test tube.

**Step 2:** Cover one end of segment with gloved hand\*, insert other end of segment into Hematype Segment Device and squeeze to obtain sample. (\*Avoids spray from improperly sealed segment.)

**Step 3: Recommended method of segment disposal:** Hold Hematype Segment Device with segment in place and discard together into an approved biohazard medical waste container.

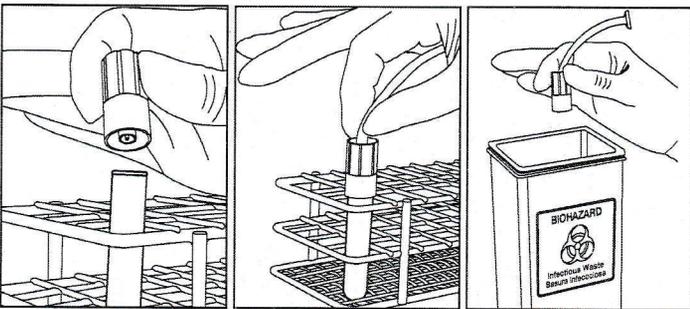

Step 1

Step 2

Step 3

**Definition of Symbols:**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Caution, consult instructions for use                           |  | Do not open packaging with sharp objects  |
|  | Do not reuse  |  | Keep dry  |
|  | Do not use if the product sterile barrier system is compromised |  | Stacking limitations  |
|  | Code  |  | Fragile   |
|  | Lot   |  | This way up   |
|  | Manufacturing facility  |  | <b>Rx only</b>  |
|  | Manufacturer  |  | For US only. United States federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed health care practitioner. |
|  | Manufacturing date  |  | © 2021 Fresenius Kabi AG. All rights reserved.  |

**Fresenius Kabi AG**  
61346 Bad Homburg / Germany  
Tel.: +49 (0) 61 72 / 686-0  
www.fresenius-kabi.com  
For US: 1-800-933-6925

**Fenwal International Inc.**  
Carretera Sanchez Km 18.5  
Parque Industrial Itabo  
Haina, Dominican Republic

**(fr) DISPOSITIF HEMATYPE POUR SEGMENT DE TUBULURE**

Pour le transfert d'échantillons sanguins de laboratoire à partir de segments de tubulure

**Rx only**

Stocker à température ambiante. Protéger du gel. Éviter la chaleur excessive.

Définition de température ambiante :

« Température d'un environnement de travail. »

Source : Pharmacopée des États-Unis (United States Pharmacopeia), Notices générales. United States Pharmacopeial Convention, Inc. 12601 Twinbrook Parkway, Rockville, MD.


**Précautions :**

- Toujours porter une tenue de protection (gants, blouse de laboratoire, lunettes de protection).
- Le dispositif Hematype pour segment de tubulure est destiné à un usage unique.
- Le dispositif Hematype pour segment de tubulure est destiné à un usage standard en laboratoire.
- Lors de l'insertion du segment de tubulure, tenir le dispositif Hematype sans toucher le tube à essai.

**Étape 1:** Installer le tube à essai dans un portoir. Placer le dispositif Hematype sur le tube à essai.

**Étape 2:** A l'aide d'une main gantée, couvrir une extrémité du segment de tubulure\*, insérer l'autre extrémité dans le dispositif Hematype et presser pour transférer l'échantillon. (\*Ceci permet d'éviter tout jet d'un segment mal soudé)

**Étape 3: Recommandation pour l'élimination du segment de tubulure :** Saisir le dispositif Hematype en laissant le segment de tubulure en position et jeter l'ensemble dans un réceptacle approuvé pour déchet biologiques dangereux.

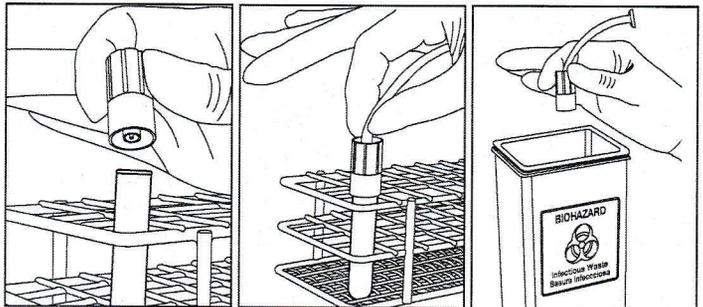

Étape 1

Étape 2

Étape 3

**Définition des symboles:**

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Attention, reportez-vous à la documentation connexe      |  | Conserver au sec   |
|  | Conçu pour un usage unique, sur un seul patient          |  | Couches  |
|  | Ne pas utiliser le dispositif si endommagé               |  | Fragile  |
|  | Référence catalogue                                      |  | Haut   |
|  | Code de lot  |  | <b>Rx only</b>   |
|  | Usine de fabrication / Fabriqué par                      |  | Destiné uniquement aux États-Unis. Selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que sur prescription d'un prestataire de soins de santé homologué. |
|  | Fabricant  |  |  |
|  | Date de fabrication                                      |  |  |
|  | N'utiliser ni couteau ni ciseaux pour ouvrir l'emballage |  |  |

© 2021 Fresenius Kabi AG. Tous droits réservés.

